

APP PS00015

利巴韦林

色谱柱：Cybele COA 8um 150mm X 7.8mm

货 号：05-CY14-06

流动相：稀硫酸水溶液 pH 至 2.5±0.1

流 速：0.5ml/min

检测器：UV@207nm

柱 温：室温


进样量：20ul

样 品：甘油果糖氯化钠注射液

方法来源：2020 中国药典

有关物质


色谱测量数据

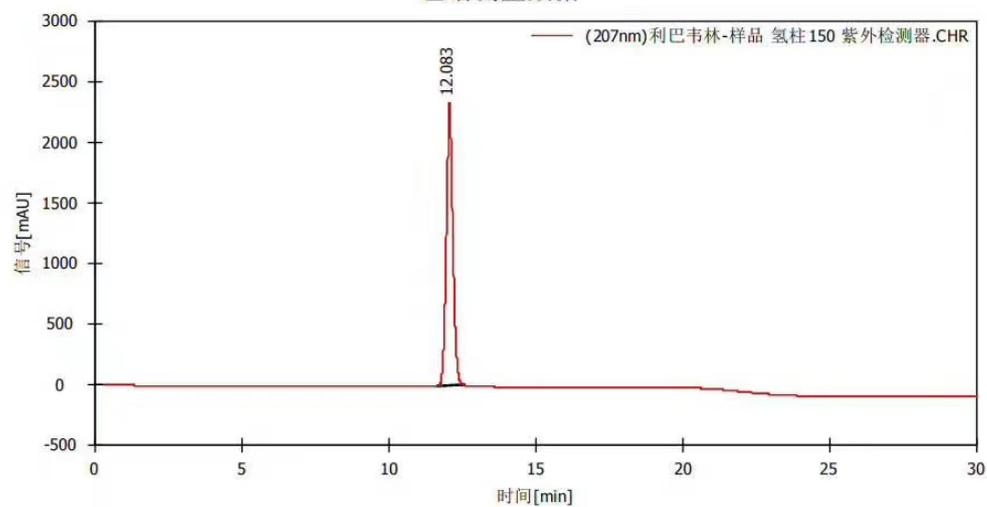

积分结果表

| | 保留时间[min] | 峰面积[mAU.s] | 峰高[mAU] | 柱效[th. pl] | 分离度 | 对称/拖尾因子 |
|----|-----------|------------|----------|------------|-----|---------|
| 1 | 12.083 | 36101.169 | 2341.212 | 14745.786 | | 1.077 |
| 合计 | | 36101.169 | 2341.212 | | | |

含量测定
色谱测量数据

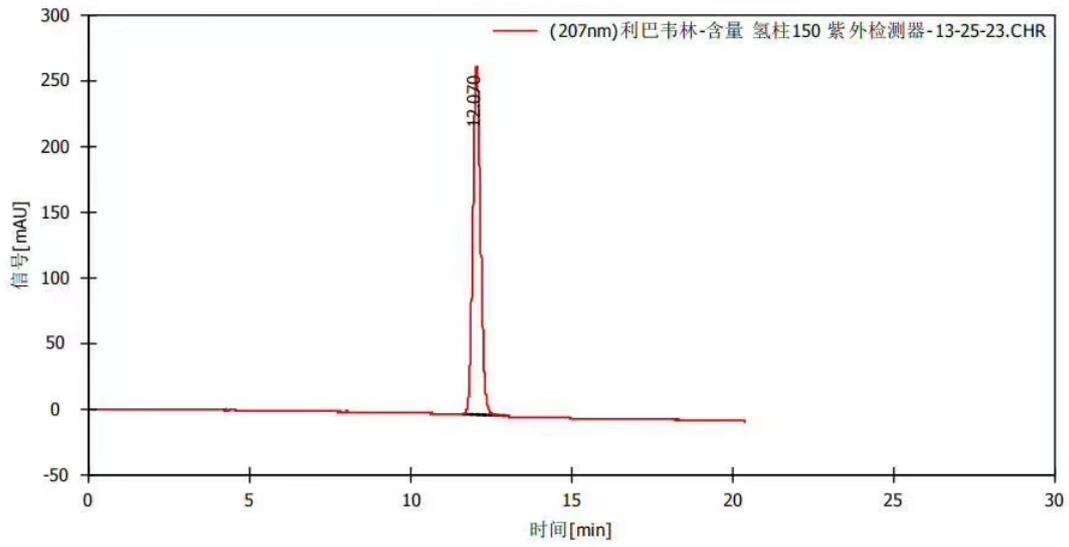

积分结果表

| | 保留时间 [min] | 峰面积 [mAU. s] | 峰高 [mAU] | 柱效 [th. pl] | 分离度 | 对称/拖尾因子 |
|----|------------|--------------|----------|-------------|-----|---------|
| 1 | 12.070 | 4458.403 | 265.545 | 12097.281 | | 1.080 |
| 合计 | | 4458.403 | 265.545 | | | |