

APP FD00003

## 果葡糖浆

色谱柱: Cybele CCM Ca<sup>2+</sup> 8% 8um 300mm X 7.8mm

货 号: 07-CY18-06

流动相: 100%纯水

流 速: 0.5ml/min


检测器: RI@40°C

柱 温: 85°C

进样量: 10ul

样 品: 果葡糖浆

方法来源: 开发

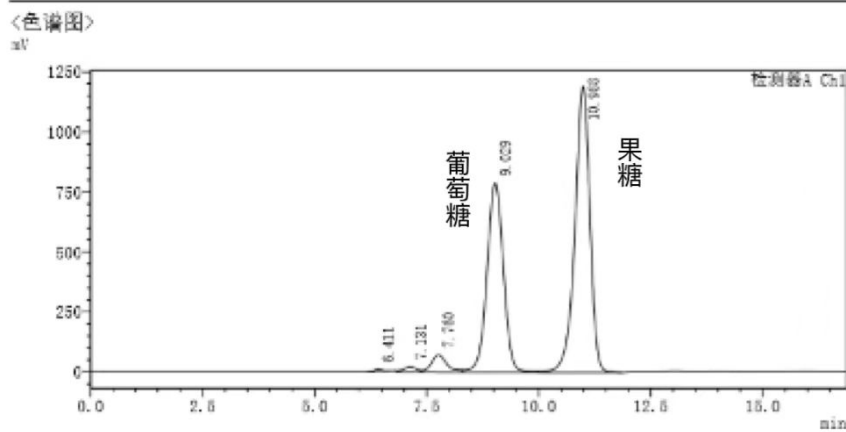

<峰表>

检测器A Ch1

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	浓度	标记
1	6.411	100343	8378	0.199	0.199	M
2	7.121	491495	23217	0.973	0.973	
3	7.760	1780944	73272	3.527	3.527	V
4	9.029	20194285	789271	39.998	39.998	SV
5	10.988	27924054	1192215	55.306	55.306	V
总计		50491121	2088352	100.000		

化合物名	理论塔板数(USP)	拖尾因子
	8764	1.661
	2479	-
	2660	-
	2960	0.985
	5363	0.880